

Инструкция по эксплуатации ирригатора

NEBULIFE 06-PRO

www.nebulife.ru



Прежде чем использовать этот прибор, внимательно прочитайте данные инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.

Содержание



Меры безопасности	3
Описание изделия	4
Инструкция по использованию	6
Характеристики	10
Охрана окружающей среды	10
Сервис и гарантия	11



Меры безопасности

- Перед эксплуатацией прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.
- Не заряжайте прибор если USB шнур повреждён.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости
- Пожалуйста, отключите прибор от зарядки, когда индикатор зарядки загорится зеленым светом.
- Не держите прибор рядом с газовой плитой, электрической плитой, духовкой и т.п.
- Не допускайте короткого замыкания батарей, не демонтируйте их, не нагревайте и не бросайте в огонь.
- Не направляйте воду в глаза, уши и другие деликатные зоны.
- Не допускайте людей с ограниченным физическим, чувствительным, психическим развитием, включая детей, и людей с отсутствием опыта в использовании прибора.

Описание изделия

1. Прозрачная крышка для транспортировки - резервуар воды
2. Порт для зарядки
3. Нижняя крышка
4. Назальная насадка
5. Кнопка включения
6. Световой индикатор зарядки
7. Внутренняя трубка
8. USB шнур для зарядки

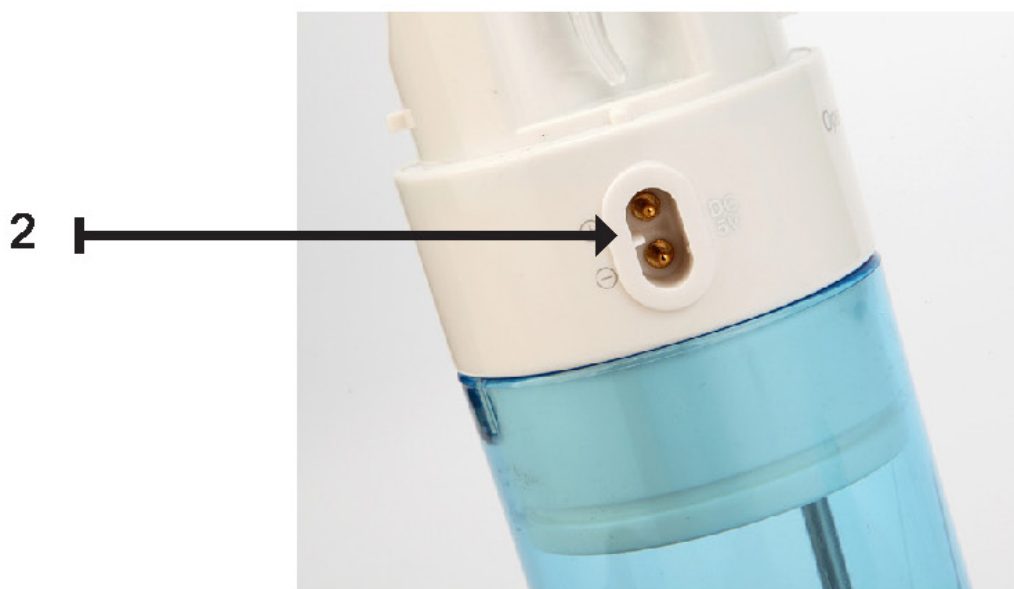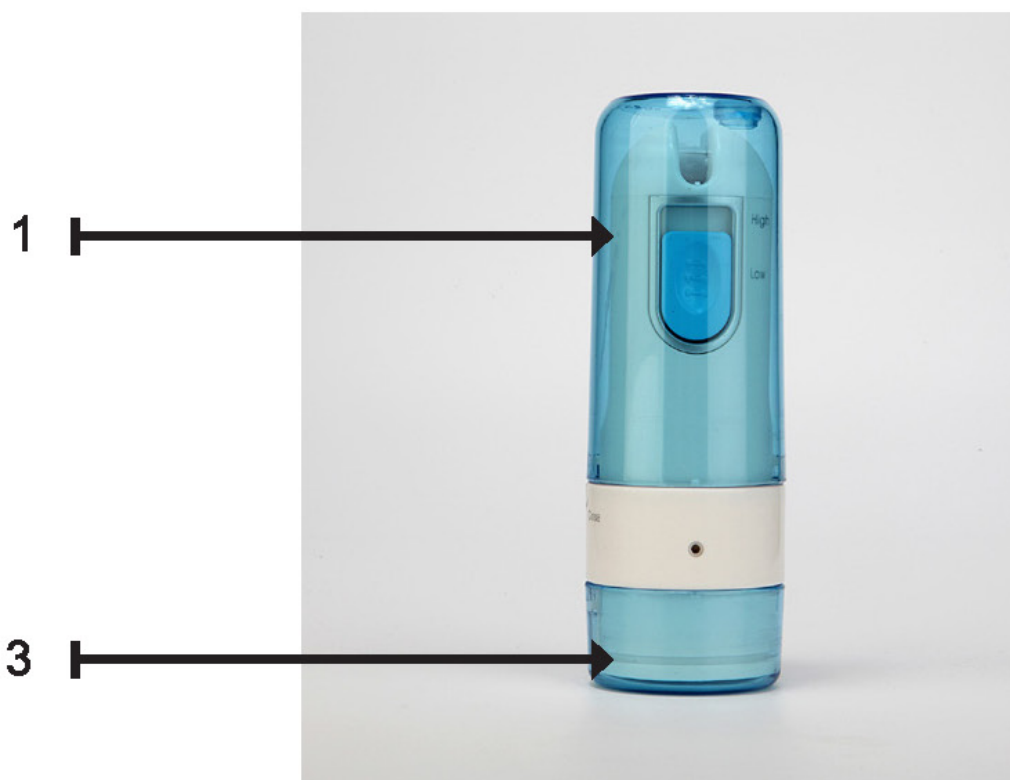

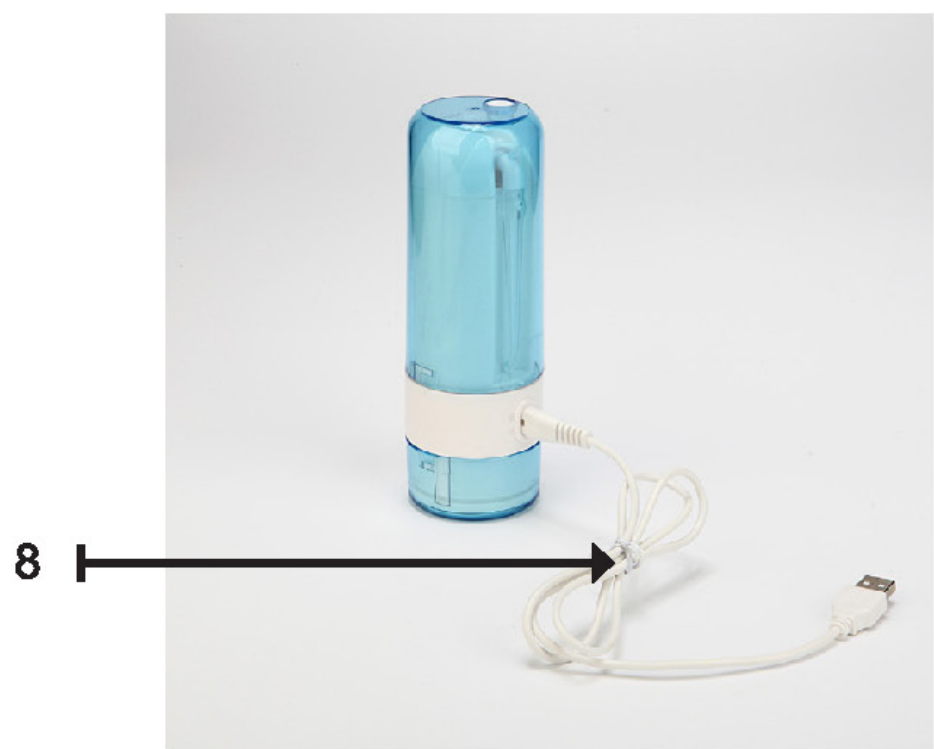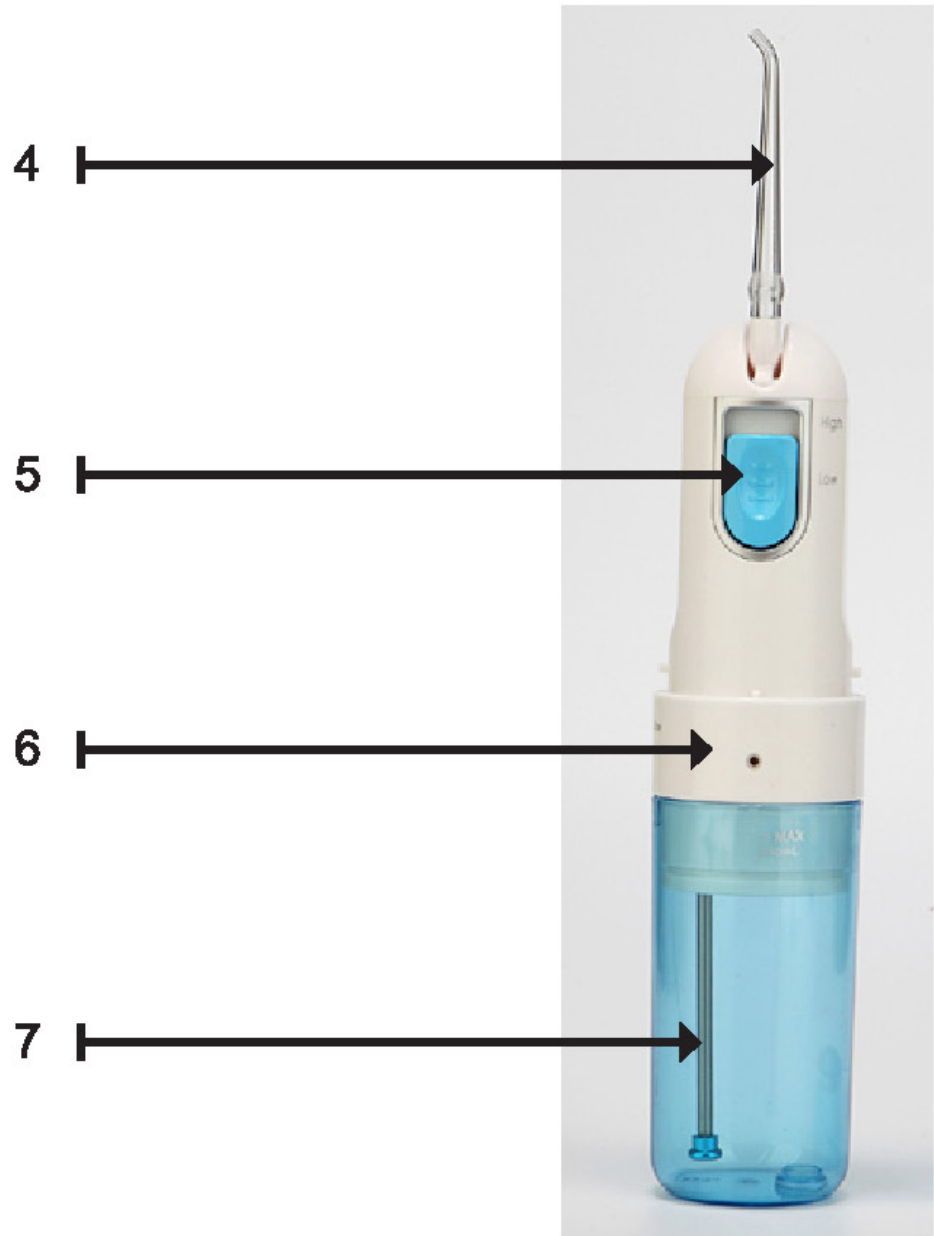

Инструкция по использованию

1 Прибор заряжается от USB шнура, который вы можете присоединить к компьютеру, портативному источнику энергии, и другим USB портам. Напряжение на устройстве вывода: 3.7 V. Ток: 500 MA

2 Пожалуйста, заряжайте устройство 16 часов перед первым использованием.
Примечание: Убедитесь в том, что кнопка включения стоит в положении выключено, когда устройство заряжается и индикатор зарядки горит красным светом.

3 Сборка



4 Выкрутите резервуар и заднюю крышку



5 Извлеките насадку поворотом вверх до щелчка



6 Выдерните внутреннюю трубку

7 Заполните резервуар водой, соедините его с основной частью прибора

- a** Вместимость резервуара 200 ml
- b** Для пациентов с заболеваниями десен можете использовать солевой раствор или другой рекомендованный раствор для ополаскивания.
- c** После использования соленого или другого раствора для ополаскивания промойте резервуар водой.
- d** В жидкости не должно быть твёрдых частиц, которые могли бы забить насадку.

8 Направить струю воды под углом 90 к линии десен. Сомкните губы, чтобы избежать брызг, чуть приоткройте рот, чтобы вода могла свободно вытекать изо рта в раковину.

Включите прибор, чтобы начать ирригацию.

Вы можете менять давление воды: 1 и 2 режим.



- I mode
- II mode
- ON/OFF


a Если хотите вынуть насадку изо рта во время ирригации, пожалуйста, убедитесь в том, что вы нажали кнопку выключения, чтобы избежать брызг.



b Во время использования, убедитесь, пожалуйста, что устройство не перевернуто, и вы не используете прибор под углом 180°.



c Вы можете поворачивать насадку чтобы изменять направление струи воды.

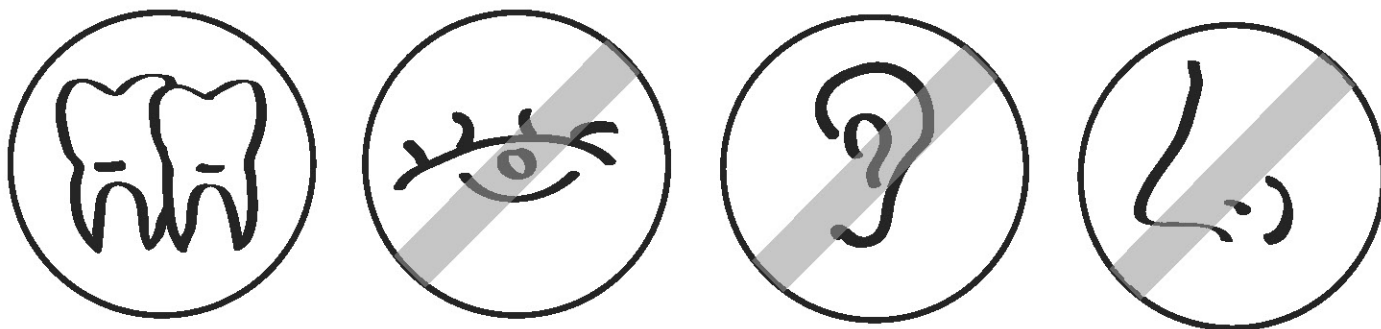

9 Вы можете перемещать насадку в любую часть рта, для тщательной очистки.

10 После использования снимите контейнер, опустошите от жидкости, поверните насадку обратно и защелкните

! ***Важно: Использование водопроводной воды, воды с высоким содержанием извести, и другой не очищенной воды - может вывести прибор из строя.***

Полезные советы и приложения:

1. Классический полезный совет: прочищайте глубоко между зубами и под линией десен. Улучшайте здоровье десен.

2. Совет по периодонтальным карманам: Мягкий резиновый наконечник, низкое давление струи воды ниже линии десен. Прибор идеально подходит для предотвращения заболеваний переодонтальных карманов и других заболеваний десен.

3. Совет для носа: Используйте прибор при синуситах, аллергических ринитах и простуде

Характеристики

Используемые материалы : PC + ABS

- 1) Частота пульсаций 1200/мин
- 2) Объем резервуара: 180 мл
- 3) Давление воды: 75-125 PSI
- 5) Режим работы: сильный/мягкий
- 6) Емкость батареи: 2000 mAh
- 7) Напряжение питания 3.7 V. Ток: 500 MA

Размеры ирригатора: 15 * 6 см

N.W .: 0.4 KGS

G.W: 0.5 KGS

Размер упаковки 13,5 x 8,3 x 19.4 см

Охрана окружающей среды

Снимите встроенные батареи перед тем как утилизировать прибор.

Пожалуйста убедитесь в том что батареи, а так же сам прибор утилизированы в специальном для этого месте, адреса вы можете узнать по ссылке:

<http://www.infoeco.ru>

Не разбирайте батареи, это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Сервис и гарантия

Гарантийное покрытие:

Любые дефекты материала и производственные дефекты

Гарантийное время:

Ирригатор: 12 мес. с даты покупки

Аккумуляторные батареи: 6 мес. с даты покупки

Как получить сервисное обслуживание:

Сохраните чек как доказательство покупки.

Обратитесь к дистрибьютору за помощью

РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Срок службы изделия:

5 лет.

Условия хранения:

При температуре от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Относительной влажности не более 85% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$

Соответствие требований регламентов:

Изделие соответствует требованиям регламента «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Адрес производства:

5/F,ShanHe International Tower,LaiWu New Village,DaLang Street,LongHua Town,Shenzhen,China

Изготовитель:

Shenzhen Acherpower Electronic Co.,Ltd

Дата выпуска:

/ 2020

Официальный дистрибьютор в России:

ООО «Небулайф» , Санкт-Петербург. Гражданский пр.,45/1,

тел.: +7(812) 716-46-32

Гарантийный талон

Магазин _____

Дата _____

ФИО, подпись продавца _____

Сервисный центр:

Россия, 195220, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург. Гражданский пр.,45/1,
тел.: +7(812) 716-46-32

Прием производится только по предварительной записи, по телефону
тел.: +7(812) 716-46-32

EAC